

¿Cuándo se usan los Ganchos Cast?

Se usan los ganchos cast en caso de diferentes diagnoses, por ejemplo cuando el estuche córneo necesita descanso y estabilidad y cuando no se puede clavar una protección de casco.

¿Qué ventaja tiene el sistema?

Durante el herraje, el casco (que está sensible y quizás doloroso) no está trepidado por los martillazos. Durante la utilización, el parte inferior de la herradura no está cubierto de la cinta sintética y por eso la cinta sintética no se desgaste.



Barra Cast

- Una barra cast tiene 9 ganchos cast.
- Necesita 6 ganchos cast para fijar una herradura Duplo.

Tornillos

- Recomendamos los tornillos siguientes para fijar los ganchos cast en la herradura Duplo: DIN 7982 / ISO 7050 tornillos autorroscantes de cabeza plana 4,2 mm x 19 mm
- Necesita 6 tornillos para fijar los ganchos cast en la herradura Duplo.
- En nuestra tienda en línea puede pedir los tornillos adecuados en un juego con la barra cast.

Cinta sintética (cast)

- La venda para inmovilización (fibra de vidrio) se endurece bajo la influencia del agua. Por lo tanto, tenga cuidado de no dañar el embalaje - tan pronto como la cinta se expone al aire, puede endurecerse debido a la humedad del aire.
- Hay dos tallas disponibles en nuestra tienda en línea: 5cm x 3,6m y 7,5cm x 3,6m

Atención: ¡Los tornillos y la cinta sintética de nuestra tienda en línea sólo están disponibles dentro de la UE!

Preparar el casco

La preparación del casco descalzo funciona de la misma manera como antes cualquier otro herraje y debe ser efectuada profesionalmente.

Preparar la herradura Duplo

- Elija la herradura Duplo que pega bien con la talla del casco, la forma del casco y el uso previsto.
- Ajuste esta herradura a la forma del casco con una amoladora angular o de banda.
- Para lograr un cierre de forma óptimo se puede cortar los tetones.


Para más informaciones visite nuestro sitio web:
www.duplo-frank.de/es/herraje
www.duplo-frank.de/es/seguridad

Consejo: Se puede combinar los ganchos cast con casi cualquiera herradura Duplo - también con los modelos con pinza abierta. Este sistema puede ser particularmente útil para los caballos que sufren de laminitis, por ejemplo.



Fijar los ganchos cast en la herradura

- Meta el tornillo en una clavera de la herradura Duplo del lado del casco.
- Meta el gancho cast en el tornillo del lado de suelo de la herradura.
- Atornille el tornillo con el destornillador eléctrico hasta que el tornillo sea avellanado en el material sintético de la herradura en la zona de la pared.
- Corte los partes sobresalientes de los tornillos con una amoladora angular o de banda.

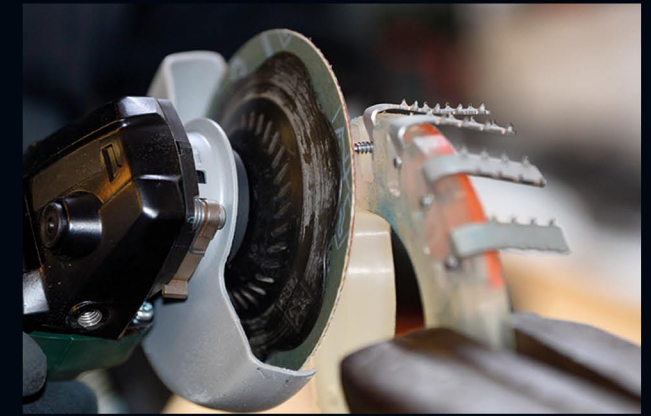

Fijar la herradura en el casco


- Para asegurar que el caballo tenga un pie seguro, una segunda persona puede recojar el casco opuesto.
- Cuando todos ganchos son fijados en la herradura, ponga los ganchos a pretensión y coloque la herradura Duplo en el casco.
- Cuando la herradura Duplo tiene la posición ideal en el casco, puede empezar a envolver el casco en la cinta sintética.
- Baje el casco y deje que la cinta sintética se endurece completamente.





Atención: Combinado con las herraduras Duplo habituales (redondo y ovalado), se puede actualmente usar los ganchos cast solamente hasta la talla 142mm. Estamos buscando una solución para las herraduras más grandes. Combinado con las herraduras de pinza abierta no hay dificultades.

Atención: No hay que la banda coronaria y los pulpejos sean cubiertos de la cinta.

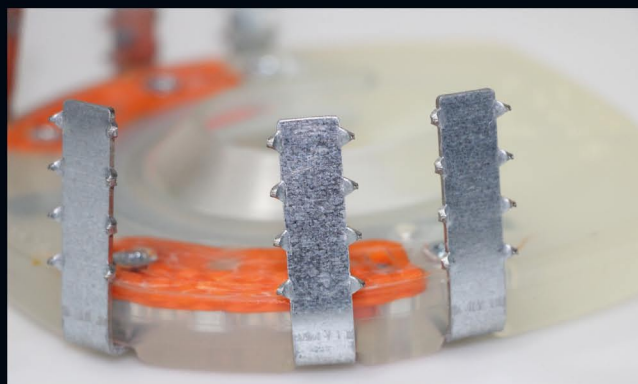

www.duplo-frank.de

Herraduras Compuestas Duplo
H. Frank Kunststofftechnik GmbH
Vorderfreundorfer Straße 20
D-94143 Grainet

Tfno: +49 (0)8585 96926-0
Fax: +49 (0)8585 96926-119
E-Mail: info@duplo-frank.de

www.duplo-frank.de
www.duplo-innovations.com

www.facebook.com/duplo.frank
www.instagram.com/duplo_verbundbeschlaege



Última modificación: 02/2021

ES

DUPLO

Ganchos Cast

